


# Aidal

## Specifiche Tecniche

Flusso	30 l/min
Pressione	-87±8% kPa
Vaso	1000 ml
Dimensioni	35 x 14 x 28 cm
Peso	3,8 kg
Tipo di funzionamento	continuo (CA)
Durata della batteria	40 min (a seconda dell'utilizzo)
Tempo di ricarica	7 h
Modalità di ricarica	rete elettrica- cavo accendisigari 12 V
Indice di Protezione	IP34
Livello di rumorosità a 1 metro	55,5 dBA

## Contatti

 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  
Via dei Prati 62  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

[www.device.airliquidehealthcare.com/it](http://www.device.airliquidehealthcare.com/it)

 **Air Liquide**  
HEALTHCARE

CE 0051

Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell'assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l'igiene e degli ingredienti specifici per la sanità. L'obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall'ospedale al proprio domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.

 **Air Liquide** | *Aidal*  
HEALTHCARE

## Aspiratore chirurgico per uso domiciliare



cod. 810344 REV. 05/2021 Graphic: www.donaldcompany.com

# Aidal

Aspiratore Chirurgico  
Domiciliare

*make it simple!*

AIDAL è il **nuovo aspiratore chirurgico** di Air Liquide Medical Systems.

L'attenzione per ogni singolo dettaglio lo rende diverso da altri apparecchi della stessa categoria: è progettato **per soddisfare le molteplici esigenze degli operatori sanitari** e facilitare la cura del paziente a domicilio.

Ogni operazione con AIDAL **è semplice e molto intuitiva**, poiché le singole caratteristiche offrono diversi vantaggi che, nell'insieme, rendono l'aspiratore **accessibile, di facile utilizzo ed estremamente efficace**.

# Aidal

Totamente **progettato e sviluppato in Italia** dal team di specialisti in medicina respiratoria di Air Liquide Medical Systems, **AIDAL** è un aspiratore performante ed affidabile con prestazioni tecniche sempre adeguate a garantire una **sicura compatibilità ed un'ottima adattabilità in ogni situazione**. E' prodotto con **materiali di alta qualità** che assicurano un utilizzo di **lunga durata**.

## Indicazioni Terapeutiche

- Aspirazione endotracheale e bronchiale
- Aspirazione per tracheostomia
- Aspirazione nasofaringea e orofaringea



## Facile da maneggiare

- Non ingombrante e facile da trasportare
- Impugnatura comoda ed ergonomica

## Facile da pulire

- Forma arrotondata e superfici lisce
- Vaso sterilizzabile incluso
- Sacca monouso compatibile con il vaso sterilizzabile incluso

## Facile da usare

- Pannello di controllo intuitivo
- Vuotometro di lettura immediata
- 3 spie led indicanti lo stato di carica delle batterie
- Manopola ideale per l'uso anche con guanti
- Filtro antibatterico montato sul coperchio del vaso per un montaggio semplificato

## Interfaccia User Friendly


- Vuotometro facile da leggere
- Comoda manopola per impostare il vuoto



- Pulsante On/Off con segnale luminoso
- Spia led verde illuminata quando il dispositivo è collegato alla corrente elettrica
- 3 led (verde, giallo, rosso) segnalano lo stato di carica delle batterie mentre un segnale acustico avverte che l'autonomia di carica è quasi finita e necessita di essere collegata alla corrente

## Efficace e comodo

- Il filtro antibatterico è montato direttamente sul coperchio del vaso, per facilitare la preparazione dell'aspiratore

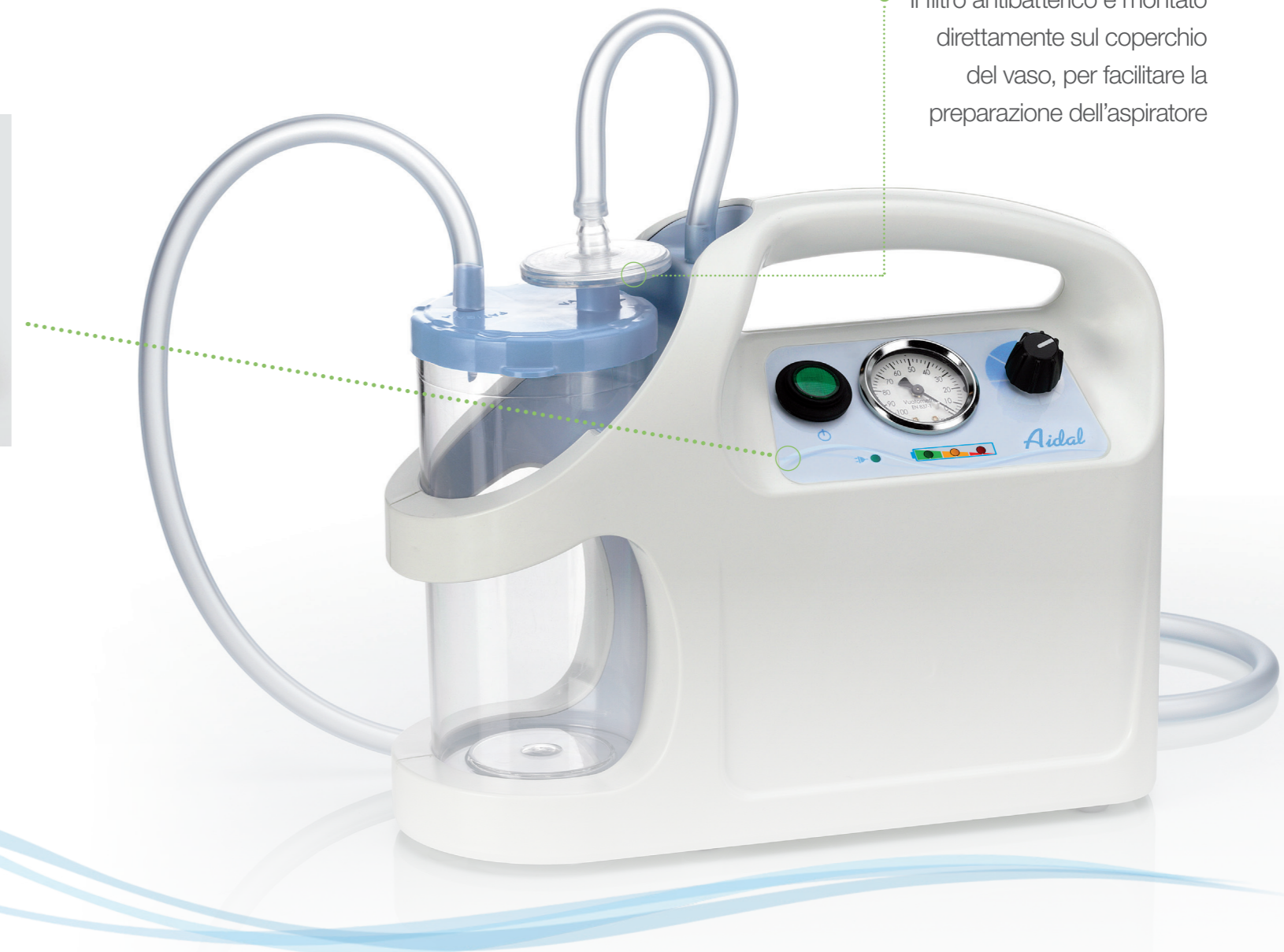

## Configurazione AIDAL (domiciliare)

- Aspiratore
- Alimentatore completo di cavo elettrico
- Tubi
- 2 filtri antibatterici
- Vaso riutilizzabile
- Connettore con valvola di controllo
- Borsa per il trasporto